

Cachet de la clinique

Dr :

Nom propriétaire :

Nom patient :

Espèce : Chien Chat Autre :

Race :

Sexe : Stérilisé : OUI NON

Date de naissance / Âge :

(facultatif) N° de tatouage / Puce :

Prélèvements

Date et heure :

Nombre d'échantillons :

Tubes : 0 1 2 3

Autres :

Règlement

Facturation mensuelle à la clinique

Règlement joint

Facturation ponctuelle à la clinique

Paiement en ligne

Aucun résultat ne sera rendu en l'absence de règlement (excepté facturation à la clinique)

Informations de facturation (facultatif si facturation à la clinique)

Adresse du propriétaire :

Code postal et ville :

Téléphone :

Adresse mail :

Transport des analyses

Dépôt laboratoire INOVIE

Ramassage par coursier INOVIE

Autre type d'envoi postal / Dépôt au laboratoire

Chronopost (12€)

Enlèvement sur demande Chronopost (16€) En ligne sur votre espace MyAnydiag

Coursier (Paris et limitrophe Paris) (12€) - Course Urgente : 01 55 39 33 33 (40€)

Anamnèse / Commémoratifs :




Localisation / Aspect macroscopique / Imagerie :

Durée d'évolution :

Traitements reçus :

Suspicion clinique :

Localisation :

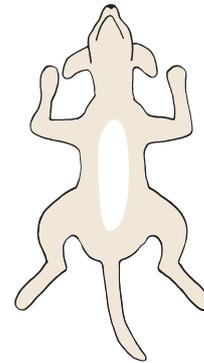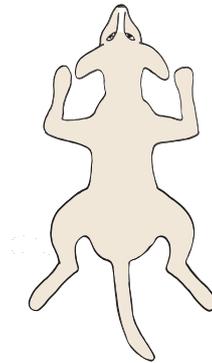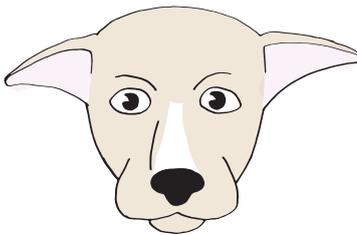

RENSEIGNEMENTS REQUIS
POUR L'INTERPRÉTATION

Bilans

Bilan d'extension mastocytome / lymphome Moelle osseuse, foie, rate, nœud lymphatique, frottis sanguin.

L + **E** +20°C

Cytologie + bactériologie Préciser nature au verso + remplir une feuille de demande de bactériologie

Cytologie + histologie Préciser nature au verso + remplir une feuille de demande d'histologie

Cytométrie en flux



Phénotypage leucémie

E +4°C



Phénotypage lymphome Ponction ganglionnaire sur milieu de transport spécifique (nous contacter)

+4°C



Rapport LT CD4/CD8

E +4°C



À la carte

- Épanchement** joindre frottis direct et du culot
- Abdominal Péricardique Pleural Autre :
- Frottis sanguin** joindre un tube EDTA correctement rempli
- Frottis**
- Conjonctival Nasal Rectal Vaginal
- LBA** joindre frottis direct et du culot
- LCS** **Humeur aqueuse**
- Liquide articulaire** joindre frottis direct
- Myélogramme** joindre un tube EDTA correctement rempli
- Noeud(s) lymphatique(s)**
- Organe** **Masse cutanée** **Masse sous-cutanée**
- Urines** joindre frottis direct et du culot
- L + E** +20°C **L + E** +20°C **L** +20°C **L + E** +20°C **L + E** +20°C **L + E** +20°C **L** +20°C **L** +20°C **L + E** +20°C

Oncologie



- Mutation BRAF** Carcinome des cellules transitionnelles de la vessie **L ou N** +20°C

Prélèvements de lésions solides (masses, nœuds lymphatiques, organes...)

- » L'utilisation d'aiguilles 25G (orange) ou 23G (bleue) est recommandée pour les ponctions de masses, 22G (noire) pour les ponctions d'organes et idéalement 25G pour les nœuds lymphatiques.
- » L'utilisation d'une cytobrosse sera privilégiée pour les lésions ulcérées (truffe de chat par exemple), les frottis de muqueuses (conjonctivale, vaginale, rectale, nasale).
- » Pour les frottis conjonctivaux, un rinçage oculaire préalable est conseillé pour éviter l'agglomération des cellules dans le mucus (difficulté de lecture et d'interprétation).
- » Les lames utilisées doivent être propres avec de préférence un bord dépoli, pour faciliter l'identification de chaque lame au crayon à papier avec le nom de l'animal/propriétaire et le site cytoponctionné.
- » Une fois étalées, les lames non colorées et non fixées peuvent être conservées plusieurs semaines, à condition de les garder à l'abri de la lumière, de la poussière et des vapeurs de formol.

Prélèvements de liquides

Sur tube EDTA (pas de seringue !)

- » La conservation des liquides est courte. L'envoi simultané d'un tube EDTA et de lames préparées lors du recueil du liquide, avec un envoi rapide (Chronopost ou coursier), reste la meilleure alternative pour garantir un résultat cytologique.
- » Les étalements sur lame sont envoyés non fixés, non colorés, et identifiés au crayon à papier.
- » Éloigner les lames de toute exposition à des vapeurs de formol.
- » Fournir une feuille de commémoratifs.

